

Mobilità Muoversi in piena indipendenza



Capri

La poltroncina elegante, comoda e sicura

VIMEC
Easy moving

VIMEC
Easy moving

Capri



Il servoscala con poltroncina ideale per il comfort della persona e l'eleganza della scala

Per la mobilità domestica scegli il comfort e la qualità di Vimec Capri: grazie alla sua tecnologia unica ed alla guida curva, si distingue per compattezza, eleganza e solidità. Capri è un prodotto di grande personalità: la poltroncina più confortevole del mercato, che risponde alle esigenze di chi la utilizza giornalmente.

Facilità di utilizzo

Salita e discesa: una levetta di comando posta sul bracciolo rende comodo e automatico ogni spostamento. Le pulsantiere di piano sono senza fili e possono essere utilizzate per collocare il servoscala nella posizione che si preferisce o per chiamarlo al piano.



Capri è la scelta di vivere la tua casa in libertà e serenità

La poltroncina Capri arricchisce la casa con tecnologia su misura ed eleganza discreta e silenziosa

■ Sicurezza e comfort

Puoi spostarti in piena libertà, grazie ai diversi accorgimenti per la protezione personale. La pedana poggiapiedi, in materiale anti-scivolamento, è dotata di bordi di sicurezza, che garantiscono l'arresto del Capri in caso di ostacoli sul percorso. Al piano di arrivo il sedile può essere ruotato di 75°, agevolando al massimo lo sbarco rendendolo confortevole e sicuro; la partenza a incremento di velocità e l'arrivo dolce sono assolutamente gradevoli per qualsiasi persona. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredo.

■ Installazione semplice

Il servoscala Capri è progettato e realizzato per adeguarsi al meglio alla tua scala: per questo è facile da montare e riduce al minimo gli interventi di installazione.



Minimo ingombro con la poltroncina ripiegabile



Una poltroncina Capri si adatta sempre alla tua casa e aggiunge valore alle tue scale

- Capri offre tecnologia a portata di mano
- Comoda, sicura e adatta a ogni tipo di scala
- Ingombri ridotti al minimo
- Qualità garantita Vimec
- Consulenza all'acquisto e assistenza in ogni provincia

■ Grande flessibilità e minimo ingombro

Studiato sia per installazioni sul lato esterno che per installazioni sul lato interno delle scale, ti mette a disposizione la configurazione più adatta alle particolarità della tua abitazione.

Nessun problema di ingombro sulla scala; infatti, la poltroncina si riduce a una unità pieghevole ribaltando la pedana, il sedile e i braccioli.

Capri

I dettagli



Il pratico joystick per un facile ed intuitivo utilizzo



Pulsante di stop; la fermata immediata è sempre garantita



Telecomando di piano



Leva di sblocco del sedile



Rotazione del sedile per uno sbarco sempre agevole sul pianerottolo

Capri

Le personalizzazioni

colori sedile



Beige - di serie



Blu



Rosso

colori guida



Avorio (di serie)



Grigio 7047




Marrone 8024

Il colore del sedile e quello della guida possono essere scelti tra quelli proposti permettendovi di integrare al meglio Capri al vostro arredo.

DATI TECNICI CAPRI

Alimentazione	230 VAC
Velocità	0.15 m/s (max.)
Durata di utilizzo	15 giri ogni 24 ore /10 giri continui
Carico massimo	125 Kg

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

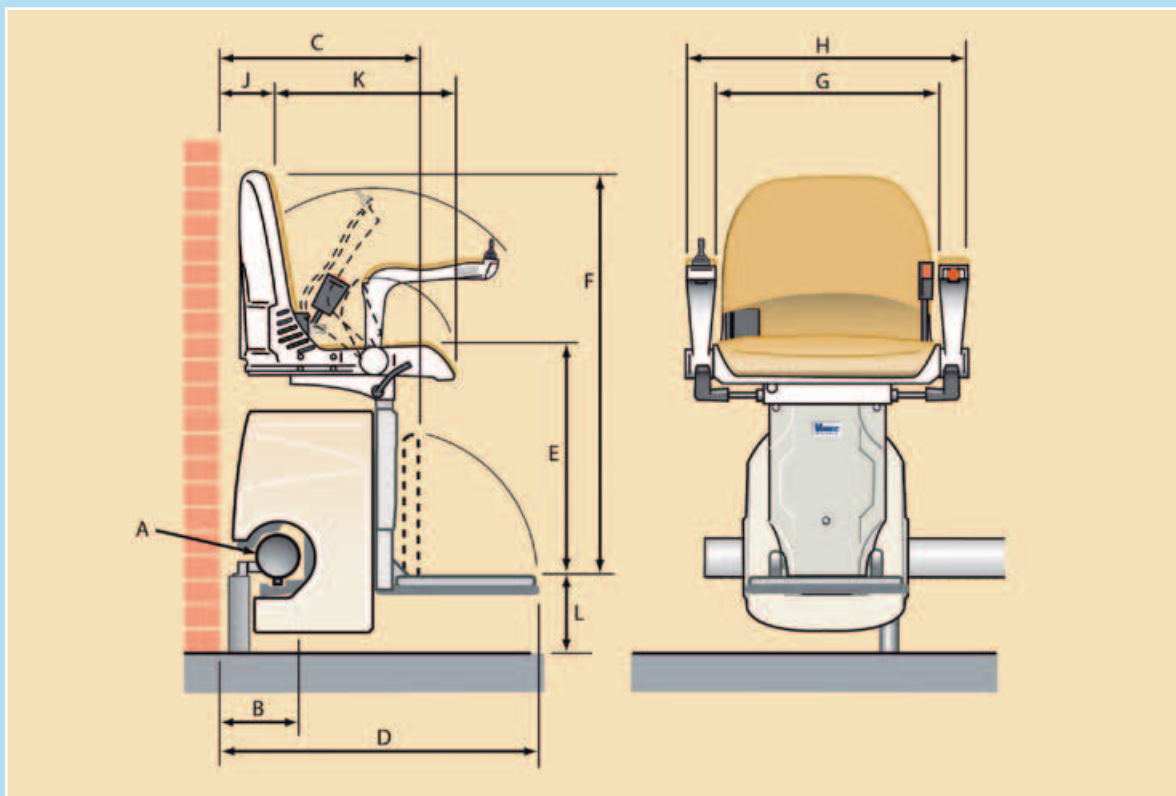

CARATTERISTICHE TECNICHE:

	Diametro	
A: Dimensioni della guida	76 mm	
B: Distanza dal lato esterno scala (zoccolo 30 mm) oppure Distanza dal lato interno scala (zoccolo 30 mm)	170 mm	190-250 mm
C: Larghezza della pedana ribaltata	420 mm	
D: Larghezza della pedana ribaltata all'ingiù (estesa) Larghezza della pedana ribaltata all'ingiù (standard)	636 mm	666 mm
E: Distanza tra la pedana ed il sedile	484 mm	
F: Distanza tra la pedana e la parte superiore dello schienale	830 mm	
G: Distanza tra i braccioli (internamente)	475 mm	
H: Distanza tra i braccioli (esternamente)	580 mm	
J: Distanza tra lo schienale ed il muro	100 mm	
K: Profondità del sedile	380 mm	
L: Distanza tra la parte superiore della pedana al pavimento In caso di *drognose*	133 mm	93 mm
Larghezza minima scala installazione lato interno	770 mm	
Larghezza minima scala installazione lato esterno	740 mm	

Le dimensioni possono cambiare in relazione al tipo di scala ed alla installazione



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Varsavia (Polonia)
Avignone (Francia), Londra (Regno Unito)



Vimec dal 1980 progetta e realizza montascale, servoscale e piattaforme elevatrici per il superamento delle barriere architettoniche, poltroncine per la mobilità personale ed elevatori domestici per accrescere l'home comfort. Vimec conta oltre 50.000 installazioni in Italia e più di 30.000 all'estero; sul territorio nazionale vanta una rete di consulenza all'acquisto e di assistenza qualificata in tutte le province, per garantire al cliente la soluzione più adatta e su misura delle proprie esigenze.



Agevolazioni all'acquisto

Contribuzioni

L'acquisto di un servoscala Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 36% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo. Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

Il servoscala Vimec è garantito per 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

